

Verkorte handleiding

Coderen niet nodig

Bloedmonster – 0,5 µL

Testtijd – 6 seconden*

Geheugen – 1865 tests

BELANGRIJK: Zie de BGStar®-gebruikershandleiding voor een gedetailleerde beschrijving van het uitvoeren van de test.

Met het BGStar®-bloedglucosemeetsysteem kunt u uw bloedglucose meten in uw vingertoppen, de handpalmen (onderaan de duim) of onderarmen (zie de gebruikershandleiding voor de exacte locaties).

Het BGStar®-bloedglucosemeetsysteem




Bloedglucose-meter

- 1) Scherm
- 2) CHECK-knop
- 3) Achtergrondverlichtingsknop
- 4) Pijltje OMLAAG-knop
- 5) Pijltje OMHOOG-knop
- 6) Strippoort



Teststrip

- 1) Contactstrepen
- 2) Vulvenster
- 3) Monstergebied

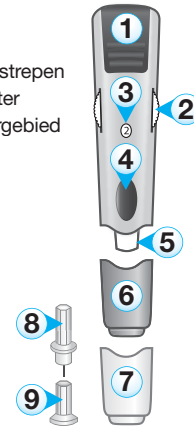

Prikpen

- 1) Spangreep
- 2) Knop voor aanpassen van de diepte
- 3) Venster voor diepte-indicatie
- 4) Vrijgaveknop
- 5) Lancethouder
- 6) Dop van de prikpen
- 7) Testdop voor alternatieve locaties
- 8) Lancet
- 9) Lancet beschermdop

*Gemiddelde testtijd

Eenvoudige stappen voor het testen van uw bloedglucosewaarde

(Zie de BGStar®-gebruikershandleiding voor een gedetailleerde beschrijving.)

1 Plaats een nieuwe teststrip in de meter:

Plaats een teststrip met de contactstrepen omhoog in de stripvoertuig van de meter. De meter schakelt automatisch aan.

VOORZICHTIG: Voor een nauwkeurige resultaat moet u voor elke test eerst uw handen wassen met warm water en zeep en ze goed afdrogen.



2 Prik op de testlocatie:

Volg de stappen voor het voorbereiden van de prikpen (zie de instructies aan de rechterzijde).


Druk de prikpen op de plek waar u wilt prikken. Druk op de vrijgaveknop.



3 Pers bloeddruppel uit:


Veeg met een zuiver doekje of papieren zakdoekje de eerste bloeddruppel die verschijnt weg.

Druk vanaf de basis van uw vinger omhoog richting de top tot een tweede druppeltje verschijnt.

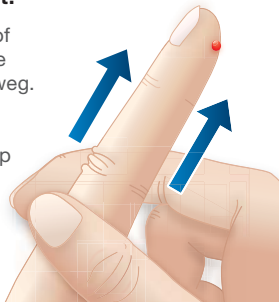


4 Breng de teststrip naar de bloeddruppel:

De teststrip trekt het bloed in de teststrip via het monstergebied.

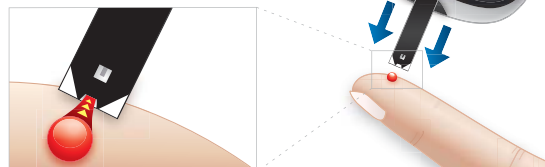

5 Verwijder de teststrip van de bloeddruppel als u de pieptoon hoort:

De meter piept eenmaal om aan te geven dat u de punt van de teststrip van de bloeddruppel moet verwijderen. De schuifbalk en 1-2-3 geven aan dat de meter de resultaten berekent.

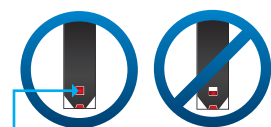

Het gehele vulvenster wordt rood.

6 Laatste stappen:


Uw test is klaar als het resultaat van de bloedglucosetest met de datum en tijd op het scherm verschijnt. Druk op de knop CHECK om de maaltijdmarkering te bevestigen en het knipperen te stoppen.

Verwijder de gebruikte teststrip. De meter wordt automatisch uitgeschakeld. Klik de dop van de prikpen af. Plaats de beschermdop terug op het lancet. Verwijder het gebruikte lancet. Gooi de gebruikte teststrip en het lancet op de juiste manier weg in de naaldcontainer.




De prikpen gereedmaken


1 Klik de dop van de prikpen af.

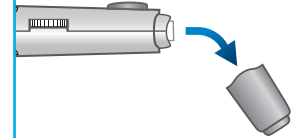


2 Plaats een nieuw lancet stevig in de lancethouder.

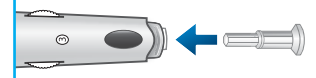

3 Draai de beschermdop van het lancet eraf.

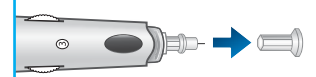

4 Plaats de dop weer op de prikpen.

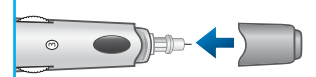

5 Stel het prikniveau in.



6 Trek de spangreep uit tot deze klikt.

